

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記検査項目におきまして、検査内容の変更をご案内いたします。
健康と医療の未来に貢献すべく、より良い検査サービスのご提供に努めてまいります。

謹白

記

■ 変更日

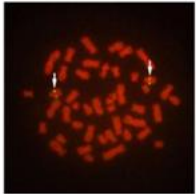
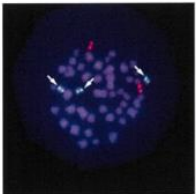
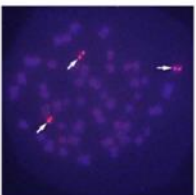
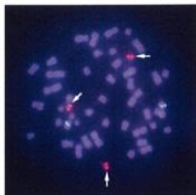
2025 年 9 月 1 日（月）ご依頼分より

■ 対象項目

項目コード (旧項目コード)	検 査 項 目	備 考
06436 1 (6436 6)	13染色体	これまで13と21をミックスしたプローブを使用していましたが、各々のプローブでの測定とさせていただきます。これに伴う検査結果への影響はありません。
06442 4 (6442 2)	21染色体	



■ 変更内容

報告書 内容	新	現
13 染色体	【検査項目】 13セリヨイ (FISH) Case ID 【検査所見】 <核型> ish 13 (RB1x2) 【検査結果】 正常シグナルパターンを検出しました。 【検査コメント】 100細胞すべてに 13番染色体 (緑) のシグナル数 2を検出し、13番染色体の異常性を認めませんでした。  【検査方法】 13番染色体長鎖 q14 (RB1: 緑) を検出するプローブを用いました。 プローブ販売元: Abbott Molecular Inc. 染色体検査で用いられる代表的な記号と略称、検査結果について記述した説明書は、検査結果報告書について記述した説明書をご参照ください。 検査者: 責任者: 検査日: 検査場所:	【検査項目】 13セリヨイ (FISH) Case ID 【検査所見】 <核型> ish 13 (RB1x3) 【検査結果】 異常シグナルパターンを検出しました。 【検査コメント】 100細胞すべてに 13番染色体 (緑) のシグナル数 3を検出し、トリソミー 13を認めました。  【検査方法】 13番染色体長鎖 q14 (RB1: 緑) と 21番染色体長鎖 q22.13-q22.2 (D21S259, D21S341, D21S342: 赤) を同時に検出するプローブを用いました。 プローブ販売元: Abbott Molecular Inc. 染色体検査で用いられる代表的な記号と略称、検査結果について記述した説明書は、検査結果報告書について記述した説明書をご参照ください。 検査者: 責任者: 検査日: 検査場所:
21 染色体	【検査項目】 21セリヨイ (FISH) Case ID 【検査所見】 <核型> ish 21 (D21S259/D21S341/D21S342x3) 【検査結果】 異常シグナルパターンを検出しました。 【検査コメント】 100細胞すべてに 21番染色体 (赤) のシグナル数 3を検出し、トリソミー 21を認めました。  【検査方法】 21番染色体長鎖 q22.13-q22.2 (D21S259, D21S341, D21S342: 赤) を検出するプローブを用いました。 プローブ販売元: Abbott Molecular Inc. 染色体検査で用いられる代表的な記号と略称、検査結果について記述した説明書は、検査結果報告書について記述した説明書をご参照ください。 検査者: 責任者: 検査日: 検査場所:	【検査項目】 21セリヨイ (FISH) Case ID 【検査所見】 <核型> ish 21 (D21S259/D21S341/D21S342x3) 【検査結果】 異常シグナルパターンを検出しました。 【検査コメント】 100細胞すべてに 21番染色体 (赤) のシグナル数 3を検出し、トリソミー 21を認めました。  【検査方法】 21番染色体長鎖 q22.13-q22.2 (D21S259, D21S341, D21S342: 赤) と 13番染色体長鎖 q14 (RB1: 緑) を同時に検出するプローブを用いました。 プローブ販売元: Abbott Molecular Inc. 染色体検査で用いられる代表的な記号と略称、検査結果について記述した説明書は、検査結果報告書について記述した説明書をご参照ください。 検査者: 責任者: 検査日: 検査場所: